

Manual de Usuario

Modelo Automatizado de Patrones en
Imágenes Mamarias



MAPIM



Índice_

Requerimientos e instalación	3
Inicio y creación de usuario	5
Menú principal	8
Realización de registrar paciente	10
Realización de la detección	12
Historial del paciente	14

MAPIM fue elaborado por:

Jhoan Ariel, Rivas Yzquierdo
Programador

Segundo Edwin Cieza Mostacero
Ingeniero de Aseguramiento de
Calidad de Software (QA)
Universidad César Vallejo



REQUERIMIENTOS E INSTALACIÓN

Estos son los requerimientos mínimos
para el uso adecuado del software





Requerimientos del software:

Sistema Operativo: Windows, macOS o Linux

Visual Studio Code: Versión compatible (2019 o superior)

PostgreSQL: Version 13 o superior

Navegador Compatible: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, etc.

Procesador Intel Core i3 o equivalente Memoria en RAM de 4 GB o superior Espacio en disco duro de 1GB

Requisitos previos que se van a instalar:

Instalar pythom 3.9 o superior

Instalar Django 4.x mejorar

PostgreSQL configurado y funcionando

Pasos para instalación:

1. Instalar dependencias: `pip install -r requirements.txt`
2. Crear la base de datos en PostgreSQL
3. Editar en `settings.py` en la sección de DATABASE cambiando el nombre de la base de datos creada en el paso 2.
4. Migrar la base de datos: `python manage.py makemigrations` luego `python manage.py migrate`
5. Iniciar el servidor: `python manage.py runserver.`
6. Navegar a `http://127.0.0.1:8000/`



INICIO Y CREACIÓN DE USUARIO_

Inicio sesión y creación de usuario



The image shows a user interface for logging in and registering. On the left, a white rounded rectangle contains the title 'Iniciar Sesión' in bold. Below it are two light gray input fields labeled 'Correo Electronico' and 'Contraseña'. At the bottom of this rectangle is a dark blue button labeled 'Entrar'. To the right, a light blue rounded rectangle contains the text '¿Aún no tienes una cuenta?' followed by 'Regístrate para que puedas iniciar sesión' and a dark blue button labeled 'Regístrate'. A red dashed line originates from the 'Entrar' button, extends horizontally to the right, and then turns vertically upwards to point towards the instructional text on the right side of the slide.

Ingrese su usuario, contraseña y luego haga clic en **Entrar**.



Creación del usuario, haga click
en **Registrarse**.

¿Ya tienes una cuenta?

Inicia sesión para entrar en la página

Iniciar Sesión

Regístrase

Nombre Completo

Correo Electronico

Usuario

Contraseña

Registrarse




MENÚ PRINCIPAL_


Inicio





Este es el menú principal de inicio

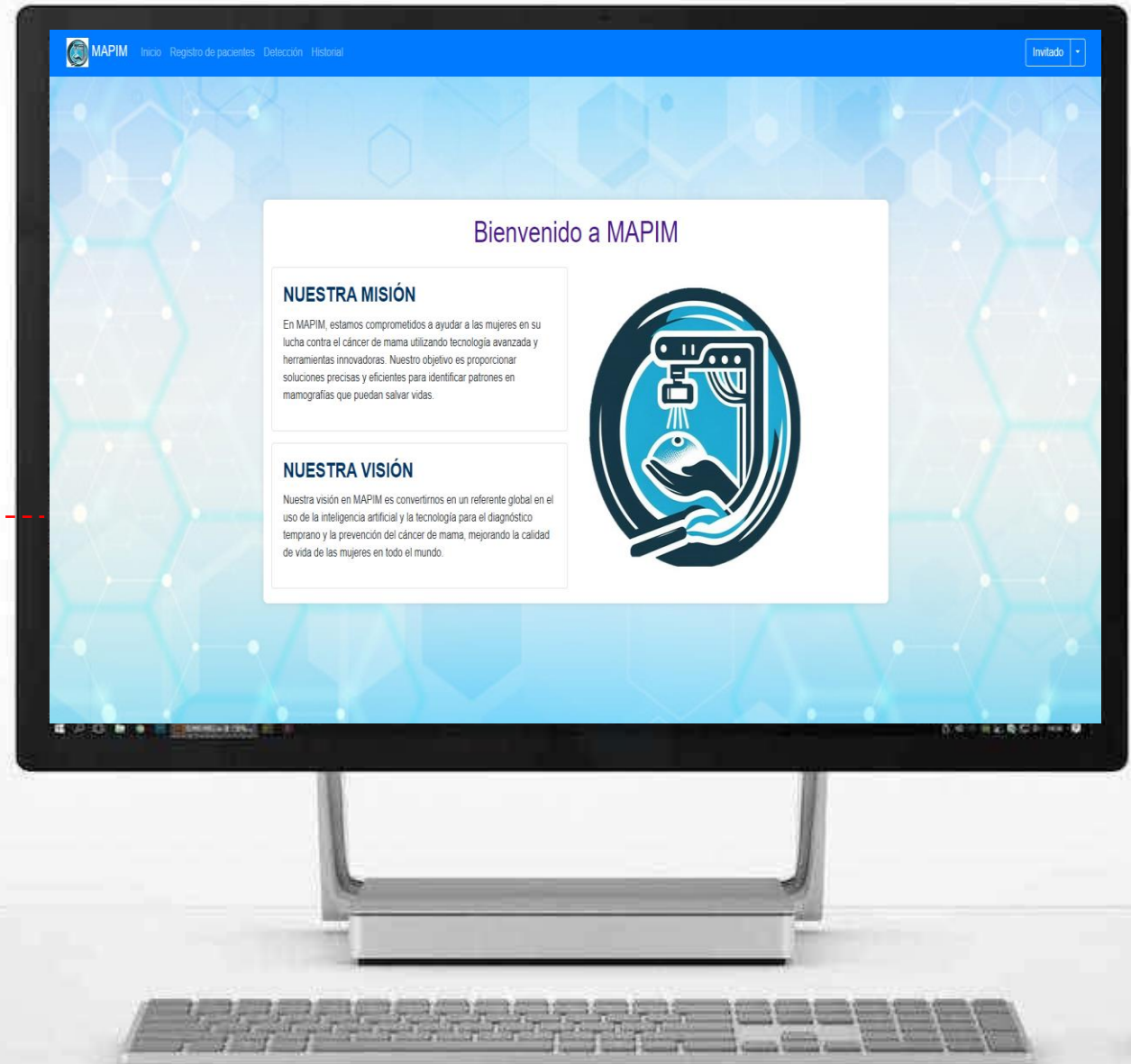

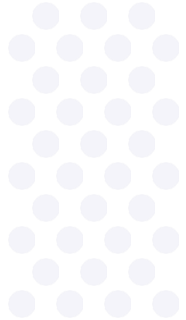

REALIZACIÓN DE REGISTRAR **PACIENTE**_

Creación del Paciente.



MAPIM Inicio Registro de pacientes Detección Historial [Iniciar sesión](#)

Registro de Paciente

DNI:

Nombre: Apellido Paterno:

Apellido Materno: Número de Contacto:

Dirección:

Fecha de Nacimiento:

[Registrar](#)

Ingrese los datos de la
paciente.

Si ya lleno los datos del
paciente, haga click en
Registrar.



REALIZACIÓN DE LA DETECCIÓN_

Se muestra como se realizara la detección.

MAPIM Inicio Registro de pacientes Detección Historial Iniciar sesión

Escaneo de Paciente

Ingrese el DNI del paciente:

Ingrese el DNI del paciente

Nombre del Paciente

Subir imagen


Detección: [Resultado de Detección]
Precisión: [Precisión]%

Ingrese el DNI del paciente y haga click en **Buscar**.

Para realizar la detección, haga click en **Realizar escaneo**.

Selección la imagen que desea escanear.

Al realizar el escaneo se muestra los **resultados** del análisis realizado. Para guardarlos se debe presionar el botón **Registrar detección**.

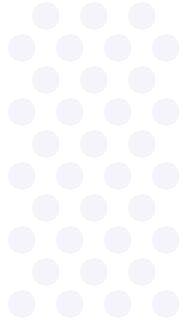

HISTORIAL **DEL PACIENTE_**

Se encuentran los registros del paciente.



Ingrese su DNI donde se indica sobre la celda

Haga clip en **Buscar por DNI**.

Para actualizar la pagina presione **Recargar**.

MAPIM Inicio Registro de pacientes DetECCIÓN Historial Inicio sesión

Historial de Escaneos

Ingresar DNI **Buscar por DNI** Recargar

DNI	Nombres	Apellidos	Fecha	Tipo	Accion
71277447	Jhoan Ariel	Rivas Yzquierdo	09/11/2024	Maligno	Eliminar
60719252	Vanesa	Sanches Neira	09/11/2024	Benigno	Eliminar
46199815	Sergio	Guzman Fernandez	09/11/2024	Benigno	Eliminar
46199815	Sergio	Guzman Fernandez	09/11/2024	Benigno	Eliminar
46199815	Sergio	Guzman Fernandez	09/11/2024	Benigno	Eliminar

Si desea eliminar el resultado, haga click en **Eliminar**.



Universidad
César Vallejo